

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
1.1 Nome Comercial

FRESA E BROCA DESCARTÁVEL MACOM

1.2 Modelo Comercial

MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MA-DRC08	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº008
MA-DRC10	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº010
MA-DRC20	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº020
MA-DRC25	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº025
MA-DRC30	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº030
MA-DRC35	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº035
MA-DRC40	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº040
MA-DRC45	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº045
MA-DRC50	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº050
MA-DRC55	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº055
MA-DRC60	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº060
MA-DRSC27	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº027
MA-DRSC31	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº031
MA-DRSC35	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº035
MA-DRSC40	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº040
MA-DRSC45	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº045
MA-DRP15	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO
MA-00FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO
MA-1014A	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 8MM – SMITH
MA-1014B	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 12MM – SMITH
MA-1014C	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 14MM – SMITH
DM8.15P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,5 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM CORTANTE
DM12.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM CORTANTE
DM16.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM CORTANTE
DM8.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM CORTANTE
DM12.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM CORTANTE
DM16.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM CORTANTE
DM8.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM CORTANTE
DM12.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM CORTANTE
DM8.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM CORTANTE
DM16.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM CORTANTE
DM8.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM CORTANTE
DM9.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM CORTANTE
DM12.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM CORTANTE
DM8.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM CORTANTE
DM12.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM8.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM9.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM12.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 120,00 MM SEMI CORTANTE
DM9.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM12.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE

DM9.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM12.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM9.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM12.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM9.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM12.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM9.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM11.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM12.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM9.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM11.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM9.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM11.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM9.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
CR-MAX2.3CE	FRESA ESTRIADA 2,3 MM DIAMOND MAX
MA-9000A1	BROCA 1,0MM X 15CM INOX
MA-7000D1	BROCA 1,5MM INOX
MA-9000B1	BROCA 1,5MM X 15CM INOX
MA-9000G1	BROCA 1,8MM X 15CM INOX
MA-9000A2	BROCA 2,0MM X 15CM INOX
MA-9000C2	BROCA 2,5MM X 15CM INOX
MA-9000J2	BROCA 2,5MM X 25CM INOX
MA-9000D2	BROCA 2,7MM X 15CM INOX
MA-9000A3	BROCA 3,0MM X 15CM INOX
MA-9000D3	BROCA 3,2MM X 15CM INOX
MA-9000G3	BROCA 3,5MM X 15CM INOX
MA-9000D4	BROCA 4,0MM X 15CM INOX
MA-9000C4	BROCA 4,5MM X 15CM INOX
MA-9000A5	BROCA 5,0MM X 15CM INOX
MA-DRC15	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº015
MA-DRC27	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº027
MA-DRC31	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº031
MA-DRC65	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº065
MA-DRC70	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº070
MA-DRC75	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº075
MA-DRC80	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº080
MA-DRC85	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº085
MA-DRC90	FRESA DO DRILL CORTANTE Nº090
MA-DRSC05	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº005
MA-DRSC10	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº010
MA-DRSC15	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº015
MA-DRSC20	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº020
MA-DRSC25	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº025
MA-DRSC30	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº030
MA-DRSC50	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº050
MA-DRSC55	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº055
MA-DRSC60	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº060
MA-DRSC65	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº065
MA-DRSC70	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº070
MA-DRSC75	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº075
MA-DRSC80	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº080
MA-DRSC85	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº085

MA-DRSC90	FRESA DO DRILL SEMI CORTANTE Nº090
MA-DRP10P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,0 X 70MM
MA-DRP11P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,1 X 70MM
MA-DRP12P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,2 X 70MM
MA-DRP13P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,3 X 70MM
MA-DRP14P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,4 X 70MM
MA-DRP16P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,6 X 70MM
MA-DRP17P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,7 X 70MM
MA-DRP18P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,8 X 70MM
MA-DRP19P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 1,9 X 70MM
MA-DRP20P	FRESA DO DRILL P/ PERFURAÇÃO 2,0 X 70MM
MA-14FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4MM
MA-23FC	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM
MA-14FCA	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 56,5MM (ADULTO)
MA-23FCI	FRESA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3 X 52,5MM (INFANTIL)
MA-14FCL	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4MM
MA-23FCL	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM
MA-14FCLA	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4 X 56,5MM (ADULTO)
MA-23FCLI	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3 X 52,5MM (INFANTIL)
MA-25FCL	FRESA DE CORTE DO LAMINÓTOMO 2,5 X 65,5MM
MA-1014AH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 8MM-HUDSON
MA-1014BH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 12MM-HUDSON
MA-1014CH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 14MM-HUDSON
DM8.10P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1.0 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.11P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,1 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.12P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,2 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.13P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,3 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.14P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,4 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.16P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,6 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.17P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,7 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.18P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,8 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.19P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 1,9 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.20P	FRESA DO DRILL DIAMOND MAX 2,0 X 80MM P/ PERFURAÇÃO
DM8.05C	FRESA ESFÉRICA 0,5 X 80,00MM CORTANTE
DM8.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM CORTANTE
DM8.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM CORTANTE
DM8.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM CORTANTE
DM8.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM CORTANTE
DM8.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM CORTANTE
DM8.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM CORTANTE
DM9.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.20C	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.25C	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 90,00MM CORTANTE

DM9.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM CORTANTE
DM9.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM CORTANTE
DM9.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM CORTANTE
DM12.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.35C	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM CORTANTE
DM12.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM CORTANTE
DM12.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM CORTANTE
DM16.10C	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.15C	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.30C	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.40C	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.45C	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.50C	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.55C	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.60C	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.65C	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.70C	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.75C	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.80C	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM CORTANTE
DM16.85C	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM CORTANTE
DM16.90C	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM CORTANTE
DM8.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.55SC	FRESA ESFÉRICA 5,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM8.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 80,00MM SEMI CORTANTE

DM8.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 80,00MM SEMI CORTANTE
DM9.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM9.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 90,00MM SEMI CORTANTE
DM11.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM11.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 110,00MM SEMI CORTANTE
DM12.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM12.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 120,00MM SEMI CORTANTE
DM16.05SC	FRESA ESFÉRICA 0,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.10SC	FRESA ESFÉRICA 1,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.15SC	FRESA ESFÉRICA 1,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.20SC	FRESA ESFÉRICA 2,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.25SC	FRESA ESFÉRICA 2,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.30SC	FRESA ESFÉRICA 3,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.35SC	FRESA ESFÉRICA 3,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.40SC	FRESA ESFÉRICA 4,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.45SC	FRESA ESFÉRICA 4,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.50SC	FRESA ESFÉRICA 5,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.60SC	FRESA ESFÉRICA 6,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.65SC	FRESA ESFÉRICA 6,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.70SC	FRESA ESFÉRICA 7,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.75SC	FRESA ESFÉRICA 7,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.80SC	FRESA ESFÉRICA 8,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.85SC	FRESA ESFÉRICA 8,50 X 160,00MM SEMI CORTANTE
DM16.90SC	FRESA ESFÉRICA 9,00 X 160,00MM SEMI CORTANTE
MA-BCH35.09	BROCA 0,9MM X 3,5CM INOX

MA-BCH60.09	BROCA 0,9MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.09	BROCA 0,9MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.09	BROCA 0,9MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.09	BROCA 0,9MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.09	BROCA 0,9MM X 11CM INOX
MA-BCH115.09	BROCA 0,9MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.09	BROCA 0,9MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.09	BROCA 0,9MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.09	BROCA 0,9MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.09	BROCA 0,9MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.09	BROCA 0,9MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.09	BROCA 0,9MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.09	BROCA 0,9MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.09	BROCA 0,9MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.09	BROCA 0,9MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.10	BROCA 1,0MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.10	BROCA 1,0MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.10	BROCA 1,0MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.10	BROCA 1,0MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.10	BROCA 1,0MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.10	BROCA 1,0MM X 11CM INOX
MA-BCH115.10	BROCA 1,0MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.10	BROCA 1,0MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.10	BROCA 1,0MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.10	BROCA 1,0MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.10	BROCA 1,0MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.10	BROCA 1,0MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.10	BROCA 1,0MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.10	BROCA 1,0MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.10	BROCA 1,0MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.10	BROCA 1,0MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.11	BROCA 1,1MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.11	BROCA 1,1MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.11	BROCA 1,1MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.11	BROCA 1,1MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.11	BROCA 1,1MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.11	BROCA 1,1MM X 11CM INOX
MA-BCH115.11	BROCA 1,1MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.11	BROCA 1,1MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.11	BROCA 1,1MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.11	BROCA 1,1MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.11	BROCA 1,1MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.11	BROCA 1,1MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.11	BROCA 1,1MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.11	BROCA 1,1MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.11	BROCA 1,1MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.11	BROCA 1,1MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.12	BROCA 1,2MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.12	BROCA 1,2MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.12	BROCA 1,2MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.12	BROCA 1,2MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.12	BROCA 1,2MM X 9,5CM INOX

MA-BCH110.12	BROCA 1,2MM X 11CM INOX
MA-BCH115.12	BROCA 1,2MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.12	BROCA 1,2MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.12	BROCA 1,2MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.12	BROCA 1,2MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.12	BROCA 1,2MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.12	BROCA 1,2MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.12	BROCA 1,2MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.12	BROCA 1,2MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.12	BROCA 1,2MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.12	BROCA 1,2MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.13	BROCA 1,3MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.13	BROCA 1,3MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.13	BROCA 1,3MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.13	BROCA 1,3MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.13	BROCA 1,3MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.13	BROCA 1,3MM X 11CM INOX
MA-BCH155.13	BROCA 1,3MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.13	BROCA 1,3MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.13	BROCA 1,3MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.13	BROCA 1,3MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.13	BROCA 1,3MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.13	BROCA 1,3MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.13	BROCA 1,3MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.13	BROCA 1,3MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.13	BROCA 1,3MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.13	BROCA 1,3MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.14	BROCA 1,4MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.14	BROCA 1,4MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.14	BROCA 1,4MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.14	BROCA 1,4MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.14	BROCA 1,4MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.14	BROCA 1,4MM X 11CM INOX
MA-BCH115.14	BROCA 1,4MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.14	BROCA 1,4MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.14	BROCA 1,4MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.14	BROCA 1,4MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.14	BROCA 1,4MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.14	BROCA 1,4MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.14	BROCA 1,4MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.14	BROCA 1,4MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.14	BROCA 1,4MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.14	BROCA 1,4MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.15	BROCA 1,5MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.15	BROCA 1,5MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.15	BROCA 1,5MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.15	BROCA 1,5MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.15	BROCA 1,5MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.15	BROCA 1,5MM X 11CM INOX
MA-BCH115.15	BROCA 1,5MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.15	BROCA 1,5MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.15	BROCA 1,5MM X 12,8CM INOX

MA-BCH145.15	BROCA 1,5MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.15	BROCA 1,5MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.15	BROCA 1,5MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.15	BROCA 1,5MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.15	BROCA 1,5MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.15	BROCA 1,5MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.15	BROCA 1,5MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.16	BROCA 1,6MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.16	BROCA 1,6MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.16	BROCA 1,6MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.16	BROCA 1,6MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.16	BROCA 1,6MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.16	BROCA 1,6MM X 11CM INOX
MA-BCH115.16	BROCA 1,6MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.16	BROCA 1,6MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.16	BROCA 1,6MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.16	BROCA 1,6MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.16	BROCA 1,6MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.16	BROCA 1,6MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.16	BROCA 1,6MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.16	BROCA 1,6MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.16	BROCA 1,6MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.16	BROCA 1,6MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.17	BROCA 1,7MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.17	BROCA 1,7MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.17	BROCA 1,7MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.17	BROCA 1,7MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.17	BROCA 1,7MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.17	BROCA 1,7MM X 11CM INOX
MA-BCH115.17	BROCA 1,7MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.17	BROCA 1,7MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.17	BROCA 1,7MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.17	BROCA 1,7MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.17	BROCA 1,7MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.17	BROCA 1,7MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.17	BROCA 1,7MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.17	BROCA 1,7MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.17	BROCA 1,7MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.17	BROCA 1,7MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.18	BROCA 1,8MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.18	BROCA 1,8MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.18	BROCA 1,8MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.18	BROCA 1,8MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.18	BROCA 1,8MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.18	BROCA 1,8MM X 11CM INOX
MA-BCH115.18	BROCA 1,8MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.18	BROCA 1,8MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.18	BROCA 1,8MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.18	BROCA 1,8MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.18	BROCA 1,8MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.18	BROCA 1,8MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.18	BROCA 1,8MM X 17,0CM INOX

MA-BCH180.18	BROCA 1,8MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.18	BROCA 1,8MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.18	BROCA 1,8MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.19	BROCA 1,9MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.19	BROCA 1,9MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.19	BROCA 1,9MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.19	BROCA 1,9MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.19	BROCA 1,9MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.19	BROCA 1,9MM X 11CM INOX
MA-BCH115.19	BROCA 1,9MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.19	BROCA 1,9MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.19	BROCA 1,9MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.19	BROCA 1,9MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.19	BROCA 1,9MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.19	BROCA 1,9MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.19	BROCA 1,9MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.19	BROCA 1,9MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.19	BROCA 1,9MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.19	BROCA 1,9MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.20	BROCA 2,0MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.20	BROCA 2,0MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.20	BROCA 2,0MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.20	BROCA 2,0MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.20	BROCA 2,0MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.20	BROCA 2,0MM X 11CM INOX
MA-BCH115.20	BROCA 2,0MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.20	BROCA 2,0MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.20	BROCA 2,0MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.20	BROCA 2,0MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.20	BROCA 2,0MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.20	BROCA 2,0MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.20	BROCA 2,0MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.20	BROCA 2,0MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.20	BROCA 2,0MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.20	BROCA 2,0MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.21	BROCA 2,1MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.21	BROCA 2,1MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.21	BROCA 2,1MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.21	BROCA 2,1MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.21	BROCA 2,1MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.21	BROCA 2,1MM X 11CM INOX
MA-BCH115.21	BROCA 2,1MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.21	BROCA 2,1MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.21	BROCA 2,1MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.21	BROCA 2,1MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.21	BROCA 2,1MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.21	BROCA 2,1MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.21	BROCA 2,1MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.21	BROCA 2,1MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.21	BROCA 2,1MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.21	BROCA 2,1MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.22	BROCA 2,2MM X 3,5CM INOX

MA-BCH60.22	BROCA 2,2MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.22	BROCA 2,2MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.22	BROCA 2,2MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.22	BROCA 2,2MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.22	BROCA 2,2MM X 11CM INOX
MA-BCH115.22	BROCA 2,2MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.22	BROCA 2,2MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.22	BROCA 2,2MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.22	BROCA 2,2MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.22	BROCA 2,2MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.22	BROCA 2,2MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.22	BROCA 2,2MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.22	BROCA 2,2MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.22	BROCA 2,2MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.22	BROCA 2,2MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.25	BROCA 2,5MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.25	BROCA 2,5MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.25	BROCA 2,5MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.25	BROCA 2,5MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.25	BROCA 2,5MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.25	BROCA 2,5MM X 11CM INOX
MA-BCH115.25	BROCA 2,5MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.25	BROCA 2,5MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.25	BROCA 2,5MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.25	BROCA 2,5MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.25	BROCA 2,5MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.25	BROCA 2,5MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.25	BROCA 2,5MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.25	BROCA 2,5MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.25	BROCA 2,5MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.25	BROCA 2,5MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.27	BROCA 2,7MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.27	BROCA 2,7MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.27	BROCA 2,7MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.27	BROCA 2,7MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.27	BROCA 2,7MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.27	BROCA 2,7MM X 11CM INOX
MA-BCH115.27	BROCA 2,7MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.27	BROCA 2,7MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.27	BROCA 2,7MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.27	BROCA 2,7MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.27	BROCA 2,7MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.27	BROCA 2,7MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.27	BROCA 2,7MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.27	BROCA 2,7MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.27	BROCA 2,7MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.27	BROCA 2,7MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.28	BROCA 2,8MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.28	BROCA 2,8MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.28	BROCA 2,8MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.28	BROCA 2,8MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.28	BROCA 2,8MM X 9,5CM INOX

MA-BCH110.28	BROCA 2,8MM X 11CM INOX
MA-BCH115.28	BROCA 2,8MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.28	BROCA 2,8MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.28	BROCA 2,8MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.28	BROCA 2,8MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.28	BROCA 2,8MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.28	BROCA 2,8MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.28	BROCA 2,8MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.28	BROCA 2,8MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.28	BROCA 2,8MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.28	BROCA 2,8MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.30	BROCA 3,0MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.30	BROCA 3,0MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.30	BROCA 3,0MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.30	BROCA 3,0MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.30	BROCA 3,0MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.30	BROCA 3,0MM X 11CM INOX
MA-BCH115.30	BROCA 3,0MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.30	BROCA 3,0MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.30	BROCA 3,0MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.30	BROCA 3,0MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.30	BROCA 3,0MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.30	BROCA 3,0MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.30	BROCA 3,0MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.30	BROCA 3,0MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.30	BROCA 3,0MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.30	BROCA 3,0MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.32	BROCA 3,2MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.32	BROCA 3,2MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.32	BROCA 3,2MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.32	BROCA 3,2MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.32	BROCA 3,2MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.32	BROCA 3,2MM X 11CM INOX
MA-BCH115.32	BROCA 3,2MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.32	BROCA 3,2MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.32	BROCA 3,2MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.32	BROCA 3,2MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.32	BROCA 3,2MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.32	BROCA 3,2MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.32	BROCA 3,2MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.32	BROCA 3,2MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.32	BROCA 3,2MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.32	BROCA 3,2MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.35	BROCA 3,5MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.35	BROCA 3,5MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.35	BROCA 3,5MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.35	BROCA 3,5MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.35	BROCA 3,5MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.35	BROCA 3,5MM X 11CM INOX
MA-BCH115.35	BROCA 3,5MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.35	BROCA 3,5MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.35	BROCA 3,5MM X 12,8CM INOX

MA-BCH145.35	BROCA 3,5MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.35	BROCA 3,5MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.35	BROCA 3,5MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.35	BROCA 3,5MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.35	BROCA 3,5MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.35	BROCA 3,5MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.35	BROCA 3,5MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.40	BROCA 4,0MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.40	BROCA 4,0MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.40	BROCA 4,0MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.40	BROCA 4,0MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.40	BROCA 4,0MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.40	BROCA 4,0MM X 11CM INOX
MA-BCH115.40	BROCA 4,0MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.40	BROCA 4,0MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.40	BROCA 4,0MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.40	BROCA 4,0MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.40	BROCA 4,0MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.40	BROCA 4,0MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.40	BROCA 4,0MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.40	BROCA 4,0MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.40	BROCA 4,0MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.40	BROCA 4,0MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.45	BROCA 4,5MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.45	BROCA 4,5MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.45	BROCA 4,5MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.45	BROCA 4,5MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.45	BROCA 4,5MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.45	BROCA 4,5MM X 11CM INOX
MA-BCH115.45	BROCA 4,5MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.45	BROCA 4,5MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.45	BROCA 4,5MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.45	BROCA 4,5MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.45	BROCA 4,5MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.45	BROCA 4,5MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.45	BROCA 4,5MM X 17,0CM INOX
MA-BCH180.45	BROCA 4,5MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.45	BROCA 4,5MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.45	BROCA 4,5MM X 25,0CM INOX
MA-BCH35.50	BROCA 5,0MM X 3,5CM INOX
MA-BCH60.50	BROCA 5,0MM X 6,0CM INOX
MA-BCH75.50	BROCA 5,0MM X 7,5CM INOX
MA-BCH90.50	BROCA 5,0MM X 9,0CM INOX
MA-BCH95.50	BROCA 5,0MM X 9,5CM INOX
MA-BCH110.50	BROCA 5,0MM X 11CM INOX
MA-BCH115.50	BROCA 5,0MM X 11,5CM INOX
MA-BCH120.50	BROCA 5,0MM X 12,0CM INOX
MA-BCH128.50	BROCA 5,0MM X 12,8CM INOX
MA-BCH145.50	BROCA 5,0MM X 14,5CM INOX
MA-BCH150.50	BROCA 5,0MM X 15,0CM INOX
MA-BCH155.50	BROCA 5,0MM X 15,5CM INOX
MA-BCH170.50	BROCA 5,0MM X 17,0CM INOX

MA-BCH180.50	BROCA 5,0MM X 18,0CM INOX
MA-BCH200.50	BROCA 5,0MM X 20,0CM INOX
MA-BCH250.50	BROCA 5,0MM X 25,0CM INOX
MA-CFC18	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 70,0MM
MA-CFC28	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 70,0MM
MA-CFC30	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 70,0MM
DM8.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 80,0MM
DM8.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 80,0MM
DM8.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 80,0MM
DM9.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 90,0MM
DM9.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 90,0MM
DM9.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 90,0MM
DM12.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 120,0MM
DM12.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 120,0MM
DM12.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 120,0MM
DM16.18CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8 X 160,0MM
DM16.28CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,8 X 160,0MM
DM16.30CFC	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0 X 160,0MM
MA-CCM16	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,6MM
MA-CCM18	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,8MM
MA-CCM30	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 3,0MM
DM8.16CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,6MM
DM8.18CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 1,8MM
DM8.30CCM	FRESA CILÍNDRICA PARA CORTE DE METAIS 3,0MM
MA-DCM254	FRESA TIPO DISCO PARA CORTE DE METAIS 25,4MM
DM8.254DCM	FRESA TIPO DISCO PARA CORTE DE METAIS 25,4MM
MA-DRFC11-6	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO 1,1 X 70MM COM STOP 6,0MM
MA-DRFC11-8	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO 1,1 X 70MM COM STOP 8,0MM
DM8.11FC6	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 6,0MM
DM8.11FC8	FRESA PARA FECHAMENTO DE CRÂNIO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 8,0MM
MA-DRBM11-12	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 12,0MM
MA-DRBM11-14	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 14,0MM
MA-DRBM11-16	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 16,0MM
MA-DRBM11-18	FRESA PARA BUCO MAXILO 1,1 X 70MM COM STOP 18,0MM
DM8.11BM12	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 12,0MM
DM8.11BM14	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 14,0MM
DM8.11BM16	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 16,0MM
DM8.11BM18	FRESA PARA BUCO MAXILO DIAMOND 1,1 X 80MM COM STOP 18,0MM
MA-FEC44.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.05H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE H)

MA-FEC115.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.06H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.07H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.08H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.10H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.12H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.14H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.15H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE H)

MA-FEC55.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.16H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.18H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.21H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.23H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.24H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.25H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE H)

MA-FEC115.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.27H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.30H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.31H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.32H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.35H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.40H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.45H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE H)

MA-FEC55.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.48H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.50H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.54H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.55H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.60H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.64H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE H)

MA-FEC115.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.70H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE H)
MA-FEC51.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 51,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC55.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC57.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 57,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC70.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC95.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC115.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC125.79H	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE H)
MA-FEC44.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.05R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.06R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.07R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.08R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.10R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE R)

MA-FEC55.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.12R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.14R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.15R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.16R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.18R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.21R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE R)

MA-FEC115.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.23R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.24R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.25R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.27R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.30R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.31R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.32R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)

MA-FEC55.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.35R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.40R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.45R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.48R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.50R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.54R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE R)

MA-FEC115.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.55R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.60R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.64R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.70R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE R)
MA-FEC51.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 51,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC55.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC57.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 57,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC70.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC95.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC115.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC125.79R	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE R)
MA-FEC44.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.05M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.06M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE M)

MA-FEC95.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.07M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.08M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.10M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.12M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.14M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.15M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.16M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.18M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)

MA-FEC70.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.32M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.35M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.40M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.45M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.48M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.50M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.54M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE M)

MA-FEC125.55M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.60M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.64M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC44.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE M)
MA-FEC51.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 51,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC55.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC95.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC115.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC125.70M	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE M)
MA-FEC70.05ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.10ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.15ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.20 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.25ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC70.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 70MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC90.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 90MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.10ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.20ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC100.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 100MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC120.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC120.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC120.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC120.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 120MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.20ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.25ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.30ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 140MM (ENCAIXE ML)

MA-FEC140.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC140.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 140MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC150.40ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC150.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC150.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 150MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC210.50ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC210.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC210.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 210MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC210.90 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 210MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC260.40 ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC260.60ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC260.75ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,5 x 260MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC260.90ML	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 x 260MM (ENCAIXE ML)
MA-FEC44.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.05J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.06J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.07J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.08J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.10J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.12J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)

MA-FEC70.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.14J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.15J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.16J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.18J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.21J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.23J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.24J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.25J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.27J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 125,0MM (ENCAIXE J)

MA-FEC115.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.54J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.55J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.60J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.64J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.70J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC44.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 44,5MM (ENCAIXE J)
MA-FEC55.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 55,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC70.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC95.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 95,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC115.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 115,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC125.79J	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 125,0MM (ENCAIXE J)
MA-FEC64.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.05S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.06S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.07S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.08S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.10S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.12S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)

MA-FEC134.14S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.15S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.16S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.18S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.21S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.23S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.24S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.25S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.27S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.30S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.31S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.32S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.35S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.40S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.45S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.48S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.50S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.54S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)

MA-FEC64.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.55S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.60S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.64S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.70S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC64.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 64-71MM (ENCAIXE S)
MA-FEC81.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 81-88MM (ENCAIXE S)
MA-FEC134.79S	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 134-141MM (ENCAIXE S)
MA-FEC70.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.05AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.06AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.07AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.08AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.10AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.12AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.14AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.15AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.16AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 90MM (ENCAIXE AH)

MA-FEC110.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.18AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.21AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,1 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.23AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,3 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.24AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.25AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.27AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,7 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.30AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.31AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,1 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.32AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,2 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.35AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.40AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.45AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.48AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,8 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 90MM (ENCAIXE AH)

MA-FEC110.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.50AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.54AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.55AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,5 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.60AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.70AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC70.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 70MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC90.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 90MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC110.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 110MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC152.79AH	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 152MM (ENCAIXE AH)
MA-FEC76.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.05HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.06HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,6 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.07HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,7 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.08HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 0,8 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.10HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.12HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,2 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.14HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.15HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.16HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.16HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,6 X 106-110MM (ENCAIXE XS)

MA-FEC76.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.64HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,4 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.70HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC76.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 76-80MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC106.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 106-110MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC136.79HXS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,9 X 136-140MM (ENCAIXE XS)
MA-FEC5.10TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.20TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.70TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 50MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.10TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.20TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC7.70TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 70MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC9.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC9.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC9.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC9.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 90MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC11.30TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC11.40TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC11.50TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC11.60TS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE TS)
MA-FEC5.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.15ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.25ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.35ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,5 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.80ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 8,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC5.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 50MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC8.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 80MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.10ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 1,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.20ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 2,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)

MA-FEC11.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC11.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 110MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC16.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC16.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC16.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 160MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC14.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC14.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC14.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC14.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC14.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 140MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.30ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 3,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.40ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 4,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.50ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 5,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.60ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 6,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.70ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 7,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-FEC20.90ANS	FRESA ESFÉRICA CORTANTE 9,0 X 200MM (ENCAIXE ANSP)
MA-14FCR	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4MM (ENCAIXE R)
MA-23FCR	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE R)
MA-14FCLR	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4MM (ENCAIXE R)
MA-23FCLR	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE R)
MA-15FCM	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE M)
MA-23FCM	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE M)
MA-15FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE M)
MA-23FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE M)
MA-30FCLM	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 3,0MM (ENCAIXE M)
MA-15FCML	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE ML)
MA-23FCML	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE ML)
MA-15FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5MM (ENCAIXE ML)
MA-23FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,3MM (ENCAIXE ML)
MA-30FCLML	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 3,0MM (ENCAIXE ML)
MA-17CFE21TS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,7 X 21MM (ENCAIXE TS)
MA-18CF12TS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,8 X 12MM (ENCAIXE TS)
MA-18CF16TS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,8 X 16MM (ENCAIXE TS)
MA-21FC22ANS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,15 X 22MM
MA-24FC30ANS	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 2,47 X 30,3MM
MA-12FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,2 X 12,8MM
MA-13FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,3 X 12,8MM
MA-14FC12ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,4 X 12,8MM
MA-18FC16ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,85 X 16MM
MA-20FC15ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,0 X 15,6MM
MA-25FC25ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,5 X 25,4MM
MA-11FC6ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,12 X 6,35MM
MA-21FC25ANS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 2,15 X 25,4MM
MA-16FC13AH1	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 13MM (ENCAIXE AH)
MA-16FC16AH2	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 16,5MM (ENCAIXE AH)
MA-16FC25AH3	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 25MM (ENCAIXE AH)
MA-16FCL18AH0	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (80-87MM) (ENCAIXE AH)
MA-16 FCL18AH1	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (100-107MM) (ENCAIXE AH)

MA-16FCL18AH2	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (120-127MM) (ENCAIXE AH)
MA-15FCL27AH0	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (80-87MM) (ENCAIXE AH)
MA-15FCL27AH1	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (100-107MM) (ENCAIXE AH)
MA-15FCL27AH2	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,5 X 27MM (120-127MM) (ENCAIXE AH)
MA-16FC13S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 13MM (ENCAIXE S)
MA-16FC16S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 16,5MM (ENCAIXE S)
MA-16FC25S	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,6 X 25MM (ENCAIXE S)
MA-16FCL18OS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (77-84MM) (ENCAIXE S)
MA-16 FCL18MS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (94-101MM) (ENCAIXE S)
MA-15FCL27OS	FRESA DE CORTE LATERAL DO CRANIÓTOMO 1,6 X 18MM (77-84MM) (ENCAIXE S)
MA-12FC13HXS1	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,2 X 11MM (ENCAIXE XS)
MA-14FC16HXS2	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 16MM (ENCAIXE XS)
MA-14FC20HXS3	FRESA ESTRIADA DE CORTE DO CRANIÓTOMO 1,4 X 20,6MM (ENCAIXE XS)
MA-CFC18ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8MM (ENCAIXE ANSP)
MA-CFC23ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,3MM (ENCAIXE ANSP)
MA-CFC30ANS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM (ENCAIXE ANSP)
MA-CFC30TS	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM (ENCAIXE TS)
MA-CFC8.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM - 8CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC8.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM - 8CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC9.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 9CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC10.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM - 10CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC10.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM - 10CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC10.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 10CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC12.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM - 12CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC12.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 12CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC14.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 14CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC15.17ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,7MM - 15CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC15.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM - 15CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC16.18ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 1,8MM - 16CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC16.22ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 2,2MM - 16CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC21.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 21CM (ENCAIXE ML)
MA-CFC26.30ML	FRESA CÔNICA "CABEÇA DE FÓSFORO" CORTANTE 3,0MM - 26CM (ENCAIXE ML)

1.3 Número do Cadastramento do Produto

Registro ANVISA: 10243070038

1.4 Acessórios

NÃO APLICÁVEL

1.5 Formas de Apresentação Comercial do Produto/Componentes do Conjunto

As Fresas e Brocas Descartáveis Macom são fornecidas na condição montada, estéril, pronta para uso, embalada individualmente num blister duplo, selado com papel cirúrgico, acondicionado em cartuchos de papel cartão para transporte e acondicionamento.

Os modelos abaixo indicados são fornecidos com o corpo (parte não ativa, que não entra em contato com o paciente) anodizado com cores diferentes para cada modelo. Os demais modelos são fornecidos na cor metálica do aço inox.

MODELO	DESCRIÇÃO	COR
MA-1014A	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 8MM – SMITH	LILÁS
MA-1014B	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 12MM – SMITH	PRETA
MA-1014C	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 14MM – SMITH	VERDE
MA-1014AH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 8MM – HUDSON	LILÁS
MA-1014BH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 12MM – HUDSON	PRETA
MA-1014CH	FRESA AUTOMÁTICA HIGH PERFORMANCE 14MM – HUDSON	VERDE

E identificada com uma etiqueta de rastreabilidade. Os rótulos (etiquetas de rastreabilidade), contem as seguintes informações:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) Nome Comercial do produto | b) Nome Técnico do produto |
| c) Modelo Comercial do produto | d) Quantidade |
| e) Data da Fabricação | f) Número do lote |
| g) Número do registro ANVISA | h) Nome do Responsável Técnico |
| i) Número Órgão de classe | j) Endereço e dados do fabricante |
| k) Informações da Esterilização (Lote de Esterilização, Data, Validade, Dados do Fornecedor) | |

Figura: Produto na embalagem externa de papel cartão tipo cartucho com Etiquetas de Rastreabilidade



As instruções de uso não estão impressas na embalagem sendo disponível no site www.macominstrumental.com.br.

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Indicação de Uso/Finalidade

As Fresas e Brocas Descartáveis Macom é uma família de produtos descartáveis, USO ÚNICO, destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, Perfurador Ósseo Canulado e Micro Serra.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Este produto não apresenta contra-indicações desde utilizado da maneira correta.

A utilização do produto é inerente à formação profissional.

2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

As Fresas e Brocas Descartáveis Macom é uma família de produtos descartáveis, USO ÚNICO, destinados a procedimentos cirúrgicos, para perfuração e modelagem óssea. Os produtos desta família são acoplados nos equipamentos pneumáticos da marca MACOM, tais como: Craniótomo Drill, Trépano e Drill Diamond Max, Perfurador Ósseo Canulado e Micro Serra.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

São fabricados em AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos, formatos de ponta e comprimentos, os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO. DESCARTAR APÓS O USO.

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.

Este produto não acompanha componente implantável.

2.3 Composição:

São fabricados em aço inoxidável em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 7153-1. Possuem formato característico, apresentados em diversos tamanhos, formatos de ponta e comprimentos, os quais definem o tipo e o código do produto, formando uma família de produtos médicos.

Produto comercializado individualmente, fornecido na condição montado, estéril, pronto para uso, esterilizado por óxido de etileno (ETO).

PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO. DESCARTAR APÓS O USO.

Os produtos desta família não possuem componentes e acessórios associados.

Este produto não acompanha componente implantável.

2.4 Dimensões/volumes

Dimensões da Embalagem (Largura x Comprimento x Altura):

- Produto com comprimento até 90mm de comprimento: 110 x 190 x 25 mm
- Produto com comprimento maior que 90mm de comprimento: 110 x 320 x 25 mm

Obs.: As dimensões da embalagem variam conforme dimensões do modelo produto.

2.5 Produto Estéril

- Sim
 Não

2.6 Método de esterilização

Esterilizado por Óxido de Etileno.

2.7 Prazo de Validade

5 anos

2.8 Fabricante Recomenda o Uso Único

- Sim
 Não

2.9 Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)






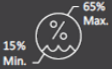

- Sim
 Não




Produto com Reprocessamento Proibido, conforme inciso I do art. 4º da Resolução ANVISA RDC Nº 156, de 11 de agosto de 2006. Enquadramento do produto realizado, na solicitação de cadastro junto à ANVISA, conforme Parágrafos 2º e 3º do art. 4º da Resolução RDC 156/01, tendo em vista, a proposição de enquadramento como produto com reprocessamento proibido estar acompanhada de documentação que fundamenta esta indicação, de acordo com o Parágrafo 4º do art. 4º desta mesma resolução.

2.10 Condições para Armazenamento

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

	Produto de uso único Single use product Producto de un solo uso
	Atenção! Consultar instruções de uso Attention, consult instructions for use Atención, consulte las instrucciones para su uso
	Produto estéril Sterile product Producto estéril
	Limitação de temperatura máxima / temperatura mínima Maximum temperature limitation / minimum temperature Limitación de la temperatura máxima / temperatura mínima
	Quantidade de material por caixa Amount of material per box Cantidad de material por caja
	Limites de umidades - UR Humidity limits Límites de humedad
	Manter ao abrigo do sol Keep away from the sun Mantener lejos del sol

	Manter seco Keep dry Mantenga seco
	Frágil Fragile Frágil
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não usar se a barreira de esterilização do produto ou embalagem estiverem comprometidas. Do not use if the packaging is damaged. Do not use if the barrier of sterilization of the product or packaging are compromised. No utilizar si está dañado el embalaje. No utilizar si la barrera de la esterilización del producto o envase se ven comprometida.

2.11 Condições para o Transporte

Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados. O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo, garantindo com isso a esterilidade do material.

Evite queda, torção, esmagamento, impacto ou qualquer ação que venha deformar o produto, pois pode comprometer sua esterilidade e funcionamento. Produtos estéreis devem ser transportados em recipientes distintos dos não estéreis de modo a evitar contaminação.

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega.

2.12 Condições de Manipulação

O manuseio deve ser realizado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.13 Advertências

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As Fresas e Brocas Macom são fornecidas estéreis.

PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO. DESCARTAR APÓS O USO.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril de uso único (descartável), não se deve reprocessar e reutilizar, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reprocessasse e reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.14 Precauções

Na utilização:

Este produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

As Fresas e Brocas Macom são fornecidas estéreis.

PRODUTO COM REPROCESSAMENTO PROIBIDO. DESCARTAR APÓS O USO.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está aberta ou danificada; verifique a validade da esterilização.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, todos os componentes deverão ser descartados, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril de uso único (descartável), não se deve reprocessar e reutilizar, pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado e reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável caso reprocessasse e reutilize o produto. Nestas circunstâncias o produto deve ser inutilizado e descartado conforme procedimento de inutilização e descarte.

Procedimento de inutilização e descarte: antes do descarte, este produto deve ser inutilizado até estar claramente identificado que está impróprio para o seu uso, para que não possam ser reaproveitados. Após a inutilização deverá ser descartado de acordo com procedimento da área hospitalar.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

No transporte e armazenamento:

Deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 10 e 35°C e umidade relativa do ar entre 15 e 65%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Caso o produto seja armazenado, conservado, manipulado e/ou transportado fora das condições específicas acima poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.15 Efeitos Adversos

Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas.

2.16 ALERTAS AO USUÁRIO – FRESA AUTOMÁTICA

Para assegurar um desempenho seguro e eficaz, siga corretamente as instruções de uso. Não seguir as instruções de uso, recomendações, advertências, precauções e alertas poderá resultar em lesões graves ou morte do paciente, ou na avaria do produto.

O cirurgião responsável deve ter o cuidado para selecionar o modelo de Fresa Automática mais adequado para utilização em áreas e condições específicas do crânio.

O cirurgião responsável deve estar sempre ciente que embora a Fresa Automática seja desenvolvida e fabricada para funcionar de forma segura e eficaz, há risco da fresa não parar; a fresa deve executar o corte suavemente, devendo reduzir a força manual exercida sob a fresa e ter cuidado ao aproximar o ponto de penetração no crânio, pois pode ocorrer o corte ou ruptura da dura mater; cuidado ao perfurar crânios finos para evitar empurrar a fresa através do crânio.

O equipamento utilizado em conjunto com a Fresas Automática deve estar na posição perpendicular (90°) ao crânio, no ponto de penetração. Não balançar a fresa para aumentar a velocidade do corte, pois poderá causar a avaria do produto ou lesão no paciente.

Não utilize a Fresa Automática em regiões do crânio perfuradas anteriormente ou próximo das mesmas.

3. ORIGEM DO PRODUTO

3.1 Nome do Fabricante:

MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 59.650.556/0001-76

Autorização de Funcionamento – AFE/ANVISA: 102430-7

3.2 Endereço do Fabricante:

Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes

CEP 07172-440 – Guarulhos / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 2431-4636

site: www.macominstrumental.com.br

e-mail: sac@macominstrumental.com.br / macom@macominstrumental.com.br

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. Alexandre Emiliano Muniz

CREA-SP 5062354150

Revisão: 01/17