

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1.1 Nome Comercial

CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM

1.2 MODELO COMERCIAL

MA-13000DAP – CABO PARA PINÇA BIPOLAR 3 METROS

MA-13000DBP – CABO PARA PINÇA BIPOLAR 3 METROS PLUG MAIOR

1.3 Número do Cadastramento do Produto

Registro ANVISA: 10243070090

1.4 Acessórios

NÃO APLICÁVEL

1.5 Formas de Apresentação Comercial do Produto/Componentes do Conjunto

O produto CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM possui a seguinte forma de apresentação:



Figura: Produto na embalagem externa de papel cartão tipo cartucho com Etiquetas de Rastreabilidade

Dimensões da Embalagem: **220 X 130 X 30mm** (Largura x Comprimento x Altura)

As instruções de uso não estão impressas na embalagem sendo apresentado em um impresso à parte, dentro da embalagem do produto.

O CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM é um produto fornecido montado, pronto para uso.

O produto é fornecido individualmente, na condição estéril, esterilizado por Óxido de Etileno – ETO. Possui um volume, embalado em Blister de PET termoselado com Polietileno de Alta Densidade - TYVEK® (embalagem primária) e embalagem Tubular de Polietileno de Alta Densidade - TYVEK® termoselada (embalagem secundária) e embalado em caixa de papel cartão tipo cartucho contendo um produto.

A embalagem externa (caixa de papel cartão tipo cartucho) é identificada com duas etiquetas de rastreabilidade e a embalagem secundária é identificada com uma etiqueta de rastreabilidade. Os rótulos (etiquetas de rastreabilidade), contém as seguintes informações:

- Nome Comercial do produto
- Nome Técnico do produto
- Modelo Comercial do produto
- Quantidade
- Data da Fabricação
- Número do lote
- Número do registro ANVISA
- Nome do Responsável Técnico
- Número Órgão de classe
- Endereço e dados do fabricante

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

2.1 Indicação de Uso/Finalidade

O CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM é um produto indicado para conexão da Pinça Bipolar com o Gerador Eletrocirúrgico. **PRODUTO NÃO INVASIVO.**

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

ATENÇÃO: Este produto somente deve ser utilizado por profissional médico especializado.

2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

O CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM é um produto indicado para conexão da Pinça Bipolar com o Gerador Eletrocirúrgico.

PRODUTO NÃO INVASIVO.

Trata-se de um cabo elétrico isolado, sem contato com o paciente, com um conector em ambas as extremidades, desenvolvido para transmitir energia elétrica entre uma Pinça Bipolar com o Gerador Eletrocirúrgico.

Obs.: este produto não se destina a se conectar diretamente aos eletrodos usados no paciente, não se destina a conectar-se à rede elétrica, não gera nenhum tipo de energia ou sinal, e não possui funcionalidade adicional de condução ou processamento não-elétrica.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

ATENÇÃO: Este produto somente deve ser utilizado por profissional médico especializado.

O produto não possui componentes e acessórios associados.

Compatibilidade/conexão com outros produtos médicos:

O CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM é um produto compatível com Pinças Bipolares e Geradores Eletrocirúrgicos registrados na ANVISA que apresentem as seguintes características:

- Potência máxima declarada: 250 W
- Carga máxima declarada: 400 Ohms
- Tensão de saída máxima: 1000 Vpico
- Fator de crista: 2,5 Vpico

2.3 Composição

O produto é composto pelas partes e componentes:

| Componente | Matéria-prima |
|-----------------------|------------------|
| Cabo elétrico isolado | Fabricado em PVC |

2.4 Normas Aplicáveis ao produto:

- IEC 60601-1 - Equipamento eletromédico - parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
- NBR IEC 60601-2-2 - Equipamento eletromédico - parte 2-2: requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência.

2.5 Dimensões/volumes

- Comprimento (mm): 3000
- Largura (mm): --
- Altura (mm): --

2.6 Produto Estéril

Sim

Não

2.7 Método de esterilização

Esterilizado por Óxido de Etileno.

2.8 Prazo de Validade

5 anos

2.9 Fabricante Recomenda o Uso Único

Sim

Não

2.10 Produto de Reprocessamento Proibido (Conforme RE 2605/2006)

Sim

Não




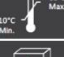






2.11 Condições para Armazenamento

O local de armazenamento do produto médico deve estar limpo, seco, inodoro, longe da luz solar direta e poeira intensa e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química. O produto deve ser armazenado e transportado em local seco e fresco, com temperatura ambiente (Máx. 35°C / Mín. 10°C), umidade relativa (Máx. 65% / Mín. 15% - não condensante) e ao abrigo da luz solar direta.

Não podem ser armazenados diretamente no chão (altura mínima = 20cm). Não podem ficar em locais muito altos, próximos a lâmpadas, o que poderia ocasionar ressecamento da embalagem ou dano no rótulo. Não devem ser armazenados em lugares nos quais sejam estocadas substâncias contaminantes como, por exemplo, materiais de limpeza, inseticidas, pesticidas, etc.

Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 16/13.

Seguir as instruções de armazenamento na Embalagem Externa de Papel Cartão Tipo Cartucho:

| | |
|---|---|
|  | Produto de uso único Single use product Producto de un solo uso |
|  | Atenção! Consultar instruções de uso Attention, consult instructions for use Atención, consulte las instrucciones para su uso |
|  | Produto estéril Sterile product Producto estéril |
|  | Limitação de temperatura máxima / temperatura mínima Maximum temperature limitation / minimum temperature Limitación de la temperatura máxima / temperatura mínima |
|  | Quantidade de material por caixa Amount of material per box Cantidad de material por caja |
|  | Limites de umidades - UR Humidity limits Limites de humedad |
|  | Mantir ao abrigo do sol Keep away from the sun Mantener lejos del sol |
|  | Mantir seco Keep dry Mantenga seco |
|  | Fragil Fragile Fragil |
|  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada. Não usar se a barreira de esterilização do produto ou embalagem estiverem comprometidas. Do not use if the packaging is damaged. Do not use if the barrier of sterilization of the product or packaging are compromised. No utilizar si está dañado el embalaje. No utilizar si la barrera de la esterilización del producto o envase se ven comprometidas. |

2.12 Condições para o Transporte

Os efeitos de vibração, choques, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento, devem ser evitados.

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo de entrega.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo, garantindo com isso a esterilidade do material.

Evite queda, torção, esmagamento, impacto ou qualquer ação que venha deformar o produto, pois pode comprometer sua esterilidade e funcionamento.

Produtos estéreis devem ser transportados em recipientes distintos dos não estéreis de modo a evitar contaminação.

Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 16/13.

2.13 Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado com cuidado evitando danos que possa prejudicar a qualidade do material e a segurança do paciente.

Durante o manuseio, evite ações que possam romper, rasgar, transmitir sujeira e umidade para a embalagem.

Durante o manuseio e transporte, as mãos e os recipientes de transporte devem estar limpos e secos.

Ao manusear o material esterilizado com técnica asséptica, devem-se obedecer a algumas normas a fim de mantê-lo estéril:

- fundamental lavar as mãos com água e sabão antes de manusear o material esterilizado;
- utilizar material com embalagem íntegra, seca, sem manchas, com identificação (tipo de material e data da esterilização);
- trabalhar de frente para o material;
- manipular o material ao nível da cintura para cima;
- evitar tossir, espirrar, falar sobre o material exposto;
- não fazer movimentos sobre a área esterilizada;
- certificar-se da validade e adequação da embalagem;
- trabalhar em ambiente limpo, calmo, seco e sem corrente de ar;
- manter certa distância entre o corpo e o material a ser manipulado;
- obedecer aos demais princípios de assepsia.

A abertura da embalagem selada de blister pode ser feita manualmente, em local adequado (ambiente cirúrgico), puxando o papel grau cirúrgico pela sobra. Essa abertura deverá ser realizada somente no ato cirúrgico para evitar contaminação do produto.

A técnica preconizada no manuseio de material esterilizado é:

- abrir, iniciando-se pela extremidade oposta ao manipulador;
- proteger o material exposto com o campo esterilizado que o envolva;
- tocar com as mãos somente na parte externa do pacote;
- não guardar como material esterilizado um pacote aberto anteriormente;

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Produtos que forem removidos da embalagem primária e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com produtos utilizados. Estes produtos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que os componentes sejam descaracterizados, entortados ou cortados para sua inutilização.

Produtos utilizados são considerados lixo hospitalar (produtos potencialmente contaminantes), devendo ser tratados como tal, conforme normas da autoridade sanitária local.

Os produtos vencidos e não utilizados devem ser descartados de forma correta, conforme normas da autoridade sanitária local.

2.14 Advertências

ATENÇÃO: Este produto somente deve ser utilizado por profissional médico especializado.

O produto só deve ser utilizado por profissional médico qualificado, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis para que não haja riscos de contaminação.

O produto é fornecido Estéril por óxido de etileno (ETO).

ATENÇÃO: "O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO".

Antes de utilizar o produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, auxiliando no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de utilizações impróprias.

Não utilize o produto fora da data de validade, sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.

O produto deve ser inutilizado e descartado em lixo hospitalar.

Caso o produto seja armazenado, transportado, manipulado ou descartado fora das condições especificadas poderá gerar riscos ao procedimento e ao paciente.

Não utilizar o produto em equipamento de Ressonância Magnética – MRI ou nas suas proximidades.

O produto CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM não deve ser utilizado para aplicações diferentes das indicadas na sua finalidade de uso.

2.15 Precauções

Observar cuidadosamente a instrução de uso antes de utilizar o produto.

Verificar a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, **NÃO UTILIZE**, pois a garantia de sua esterilidade estará comprometida.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Produto fornecido estéril por óxido de etileno; deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do seu uso, segundo os procedimentos de assepsia médica hospitalar.

Caso a embalagem seja violada ou danificada, o produto deve ser descartado, mesmo que apresentem em perfeitas condições.

Produto fornecido estéril. "**O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO**", pois o desempenho do produto não é garantido para o uso pretendido caso seja reprocessado ou reutilizado; ficando ao cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico a inteira responsabilidade de qualquer risco ou efeito indesejável.

Seguir as condições de armazenamento, transporte, manipulação e descarte, a fim de evitar riscos ao procedimento e ao paciente.

2.16 Efeitos Adversos

Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas

Contraindicações:

O produto não deve ser utilizado para aplicações diferentes das indicadas na sua finalidade de uso.

3. ORIGEM DO PRODUTO

3.1 Nome do Fabricante:

MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA

CNPJ: 59.650.556/0001-76

Autorização de Funcionamento – AFE/ANVISA: 102430-7

3.2 Endereço do Fabricante:

Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes

CEP 07172-440 – Guarulhos / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 2431-4636

site: www.macominstrumental.com.br

e-mail: sac@macominstrumental.com.br / macom@macominstrumental.com.br

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng. Alexandre Emiliano Muniz

CREA-SP 5062354150

Revisão: 00/19